

# KerraFoam™

Simple Border




**Foam verband met siliconen kleeflaag  
voor voor matig exsuderende wonden**



## KerraFoam™ Simple Border voor chronische en acute wonden

Alle wonden produceren exsudaat (vocht), voor het herstellen en genezen van de beschadigde huid. KerraFoam Simple Border is ontworpen om overtollig vocht op te nemen vanuit het wondbed, terwijl de omliggende huid wordt beschermd voor de genezing van chronisch en acute wonden.

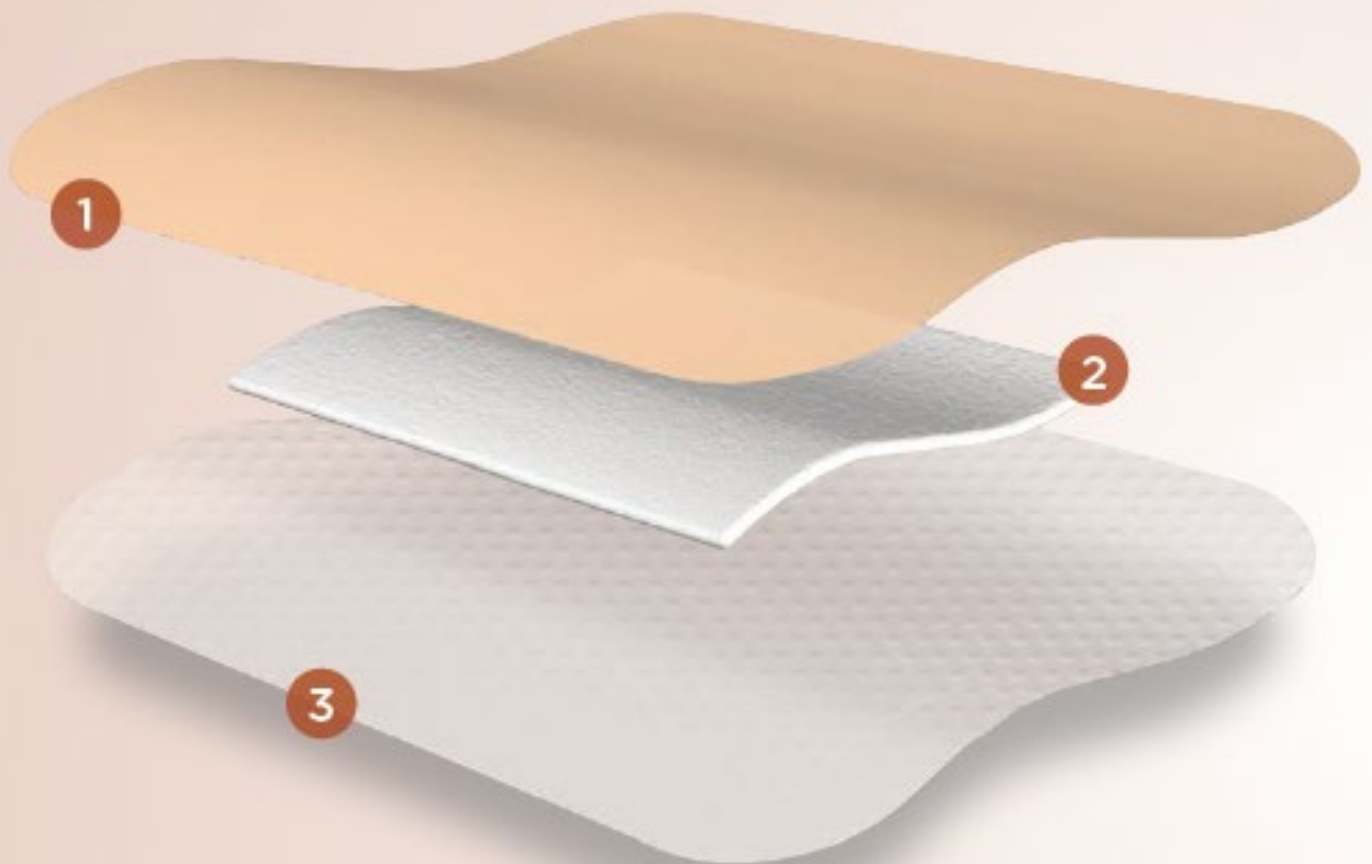

### Hoe werkt het?

- 1 Buitenste polyuretane film laag. Water resistent en beschermt de wond tegen bacteriën en contaminatie van buitenaf.
- 2 Hydrofiele polyuretane foam laag. Absorbeert en houdt exsudaat vast weg van het wondbed ter bevordering van de genezing.
- 3 Zachte klevende siliconen wond contact laag. Houdt het verband op zijn plek t/m de kleeftand van KerraFoam Simple Border. Minder pijn bij de verbandwissel voor de patiënt. Hecht aan de omliggende huid, maar niet aan het wondbed.

Ook beschikbaar in een versie zonder border

## KerraFoam™ Simple

De buitenste polyurethane film laag en hydrofiele polyuretane foam laag werken op dezelfde manier als de KerraFoam Simple Border. Ze absorberen en houden het exsudaat vast weg van het wondbed ter ondersteuning van de genezing en het beschermen van de wond tegen bacteriën en contaminatie van buitenaf.

KerraFoam Simple heeft een zachte siliconen wond contact laag die het verband aan de huid laat hechten zonder kleebrand.



## Indicaties

KerraFoam Simple en KerraFoam Simple Border zijn geschikt voor een variatie aan matig exsuderende wonden zoals:



Diabetische voetwond\*



Been ulcus\*



Conformeerbaar



Eenvoudig  
aan te brengen



Voor wonden met  
matige exsudaat  
productie

## We werken samen met u in elke fase van exsudaat management



Ons overzicht is een middel om te ondersteunen bij de juiste selectie van een verband – en de zekerheid dat de wond wordt beschermd, ongeacht de diverse gradaties in wondvocht. Onze verbanden ondersteunen op diverse manieren bij vocht management om te voorzien in wat u en uw patiënt nodig heeft. Voor meer informatie of een product demonstratie, kunt u contact opnemen met uw account manager van KCI bij GDM, bellen met onze klantenservice op 040- 3031099 of kijken op [www.gdm-medical.nl](http://www.gdm-medical.nl)

### Bestelinformatie

KerraFoam Simple/Border is beschikbaar in diverse maatvoeringen.

Maat	Verbanden per doos	Productcode	ZI- nummer
<b>KerraFoam Simple Border</b>			
7.5 x 7.5cm	10	CWL1198	16797876
10 x 10cm	10	CWL1199	16797884
12.5 x 12.5cm	10	CWL1200	16797914
15 x 15cm	10	CWL1201	16797949
15 x 20cm	10	CWL1203	16797922
10 x 20cm	10	CWL1202	16797892
<b>KerraFoam Simple (Non-Border)</b>			
5 x 5cm	10	CWL1204	16797937
10 x 10cm	10	CWL1205	16797973
15 x 15cm	10	CWL1207	16798013
10 x 20cm	10	CWL1208	16797981
20 x 20cm	10	CWL1209	16798023



Crawford Healthcare Ltd | King Edward Court | King Edward Road | Knutsford  
Cheshire | WA16 0BE | UK | Tel: +44 (0)1565 654 920 | Email: [info@crawfordpharma.com](mailto:info@crawfordpharma.com)  
[www.crawfordhealthcare.com](http://www.crawfordhealthcare.com)

KerraLite Cool™, KerraGel™, KerraMax Care™ and KerraFoam™ zijn handelsmerken van Crawford Woundcare Ltd. Eco-Safe™ Technology is a registered trademark of Crawford Healthcare Ltd. © Copyright Crawford Healthcare Ltd, 2018. \*Wound images reproduced with patients' permission.