


TULIP PRODUCT CATALOGUS



Tulip[®]
AUTHORIZED
DISTRIBUTOR

GD
medical

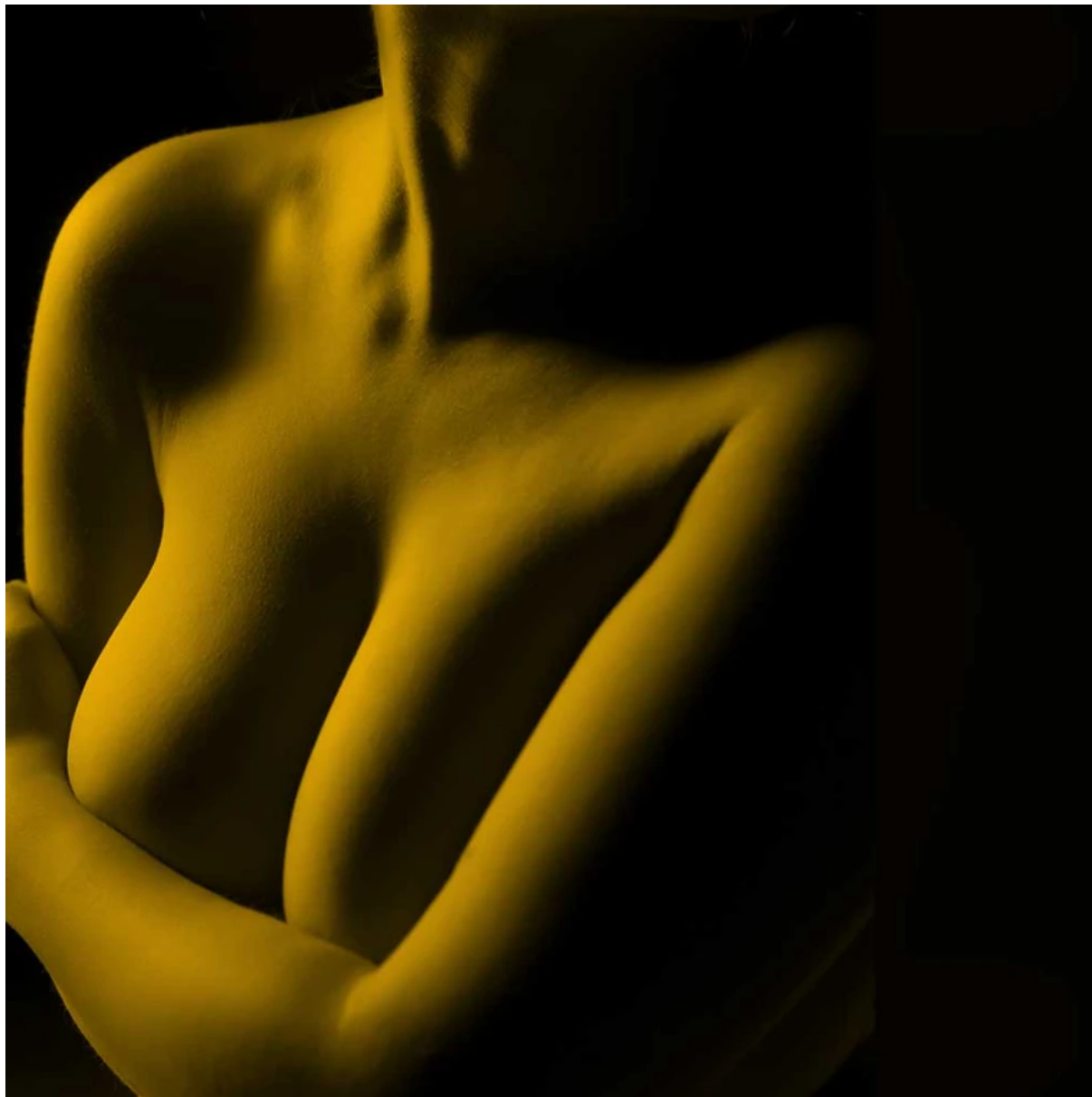

Aanbevolen sets
pagina 1-4



Harvest canules
pagina 5 - 6



Injectoren en micro- injectoren
pagina 7



Speciale en lipocanules
pagina 8



Instrument verbindingen
pagina 9



GEMS Instrumenten single use
pagina 10-12



NanoTransfer
pagina 13



Transfer en emulgering
pagina 14



**Instrumentarium voor
spuiten**
pagina 15-16



Centrifugeren en Crowns
pagina 17-18



Decanteren grote volumes
pagina 19



Reinigen en opbergen
pagina 20

**Delivering the benefits
of fat to millions...**

Herbruikbare instrumentensets

Door chirurgen wereldwijd beschouwd als de ideale sets voor succesvolle vettransplantatie. De Gold Standard Sets zijn voorzien van Tulip's gepatenteerde SuperLuerLok-hub en gepatenteerde CellFriendly™-technologie.



De Tulip Gold Standard Facial Set™

Deze complete set bevat Tulip's gepatenteerde SuperLuerLok-hub en gepatenteerde CellFriendly-cannules om vetweefsel te oogsten en opnieuw te injecteren. Deze set bevat een Tumescent Infiltrator en een Sorensen Harvester met 1 mm micropoorten om weefsel te oogsten dat compatibel is met de drie micro-injectoren van Tulip:

- De Tulip injector 0,7 mm x 4 cm (voor het periorbitale gebied)
- De Tulip injector 0,9 mm x 5 cm (voor het middengezicht, de lippen en de slapen)
- De Tulip injector 1,2 mm x 7 cm (voor de mandibulaire regio)

De Tulip Injector is ontworpen met een stompe punt om gemakkelijk door zacht weefsel te gaan zonder het trauma of mogelijke risico's die gepaard gaan met scherpe naalden. Opmerking: andere oogstmachines kunnen worden vervangen door de Sorensen-oogstmachine. Bel 040- 3031 099 om deze optie aan te vragen bij het bestellen.

- 1 stuks Tumescent Infiltrator SuperLuerLok 2.1mm x 20cm
- 1 stuks Sorensen Harvester SuperLuerLok 2.4mm x 20cm
- 1 stuks Tulip Micro Injector SuperLuerLok 0.7mm x 4cm
- 1 stuks Tulip Micro Injector SuperLuerLok 0.9mm x 5cm
- 1 stuks Tulip Micro Injector SuperLuerLok 1.2mm x 7cm
- 1 stuks JohnnieLok BD 10cc
- 1 stuks JohnnieLok BD 20cc
- 1 stuks Decant Stand & Anaerobic Transfer Luer to Luer



NanoTransfer Set™ Generation I


- 1 stuks NanoTransfer Generation I
- 10 stuks Sterile NanoTransfer Cartridge
- 1 stuks Sizing Transfer 1.2mm
- 1 stuks Sizing Transfer 1.4mm
- 1 stuks Anaerobic Transfer 2.4mm



Tulip NanoSpin Crown Kit™

Alles wat je nodig hebt om aan de slag te gaan
Tulip's revolutionaire geavanceerde weefselverwerking in een gesloten systeem.

- De Tulip NanoSpin met 8-place rotor
- Acht herbruikbare Tulip Crowns voor 10cc BD spuit
- 10cc Luer BD Syringes - doos van 100
- Red Luer Tip Caps voor Centrifuge, 10 steriele verpakkingen van 10 (100)

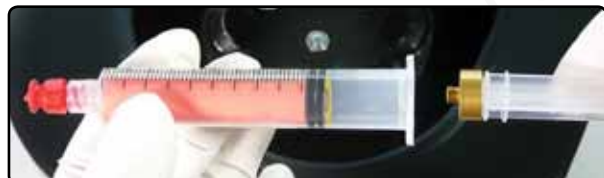

Kits voor eenmalig gebruik



SoftTouch Micro Kit™ Vijf patiënten

Dit gesloten systeem voor eenmalig gebruik helpt vetweefsel op maat te maken tot op microfat, zodat het kan worden geïnjecteerd met Tulip injectoren.

Sets voor 5 procedures bevatten:

- 5 stuks Single-Use Sizing Transfer 1.2mm
- 5 stuks Single-Use Sizing Transfer 1.4mm
- 5 stuks Single-Use Anaerobic Transfer 2.4mm




True NanoFat™ Vijf patiënten

Tulip's gepatenteerde NanoTransfer. Het gepatenteerde gesloten systeem levert vetweefsel dat kan worden geïnjecteerd met naalden van 27 g en 30 g.

Sets voor 5 procedures bevatten:

- 5 stuks NanoTransfer Generation II
- 5 stuks Single-Use Sizing Transfer 1.2mm
- 5 stuks Single-Use Sizing Transfer 1.4mm
- 5 stuks Single-Use Anaerobic Transfer 2.4mm

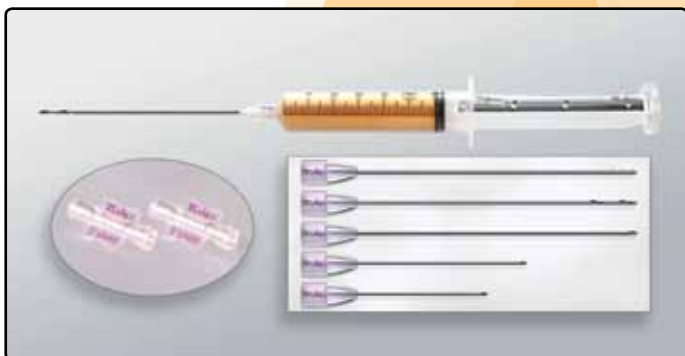


SoftBreast Microfat™

Nieuw! Maak kennis met de SoftBreast Microfat Kit voor gepersonaliseerde borstvergroting.

Het SoftBreast-systeem gebruikt het eigen vetweefsel van de patiënt om asymmetrieën te corrigeren, het decolleté te verbeteren en een natuurlijke, zachte uitstraling aan de vergrote borst te geven.

- 1 stuks GEMS Tumescent Infiltrator 2.1mm x 15cm
- 2 stuks GEMS Miller Speed Harvester 2.1mm x 15cm
- 1 stuks GEMS Spoon Tip Injector 2.1mm x 15cm
- 1 stuks GEMS Tulip Injector 1.4mm x 9cm
- 1 stuks GEMS Tulip Injector 1.2mm x 7cm
- 2 stuks Miller OneSnap 60cc
- 2 stuks Single-Use Anaerobic Transfer 2.4mm
- 4 stuks Harvesting Syringes 60cc BD
- 6 stuks Harvesting Syringes 10cc BD
- 6 stuks Injection Syringes 1cc BD

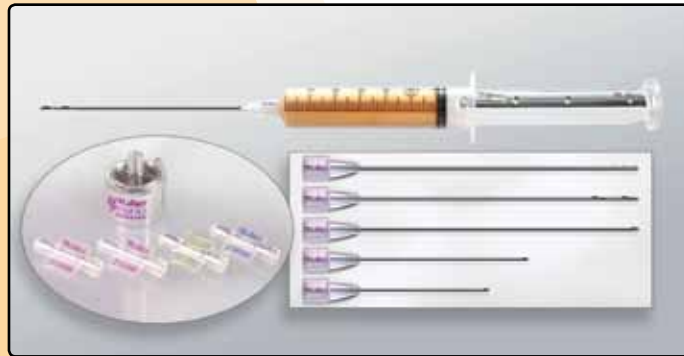

SoftBreast Microfat + TNF™

Nieuw! Maak kennis met de SoftBreast Microfat + TNF Kit voor gepersonaliseerde borstvergroting.

Het SoftBreast-systeem gebruikt het eigen vetweefsel van de patiënt om asymmetrieën te corrigeren, het decolleté te verbeteren en een natuurlijke, zachte uitstraling aan de vergrote borst te geven.

TNF voor het decolleté bij de ouder wordende patiënt voltooit de totale procedure voor gepersonaliseerde borstvergroting.

- 1 stuks GEMS Tumescent Infiltrator 2.1mm x 15cm
- 2 stuks GEMS Miller Speed Harvester 2.1mm x 15cm
- 1 stuks GEMS Spoon Tip Injector 2.1mm x 15cm
- 1 stuks GEMS Tulip Injector 1.4mm x 9cm
- 1 stuks GEMS Tulip Injector 1.2mm x 7cm
- 2 stuks Miller OneSnap 60cc
- 1 stuks NanoTransfer Generation II
- 1 stuks Single-Use Sizing Transfer 1.2mm
- 1 stuks Single-Use Sizing Transfer 1.4mm
- 2 stuks Single-Use Anaerobic Transfer 2.4mm
- 4 stuks Harvesting Syringes 60cc BD
- 6 stuks Harvesting Syringes 10cc BD
- 6 stuks Injection Syringes 1cc BD



Procedure kits voor eenmalig gebruik



SoftTouch Microfat™

Het SoftTouch-systeem gebruikt het eigen vetweefsel van de patiënt, ideaal voor verschillende soorten autologe transplantatieprocedures. Selecteer de kit aan de hand van de harvest canule.



SoftTouch Carraway Microfat™



SoftTouch Miller Microfat™

- 1 stuks GEMS Tumescant Infiltrator 2.1mm x 15cm
- 2 stuks GEMS Carraway or Miller Speed Harvester 2.4mm x 15cm
- 1 stuks GEMS Tulip Injector 0.7mm x 4cm
- 1 stuks GEMS Tulip Injector 0.9mm x 5cm
- 1 stuks GEMS Tulip Injector 1.2mm x 7cm
- 1 stuks Johnnie Snap 60cc
- 1 stuks Single-Use Sizing Transfer 1.2mm)
- 1 stuks Single-Use Sizing Transfer 1.4mm
- 2 stuks Single-Use Anaerobic Transfer 2.4mm)
- 2 stuks Harvesting Syringes 60cc BD
- 2 stuks Harvesting Syringes 10cc BD
- 4 stuks Injection Syringes 1cc BD

Tulip's NanoTransfer waarvoor patent aangevraagd - vetoverdracht op het kleinste niveau.



SoftTouch Microfat + TNF™

Het SoftTouch-systeem gebruikt het eigen vetweefsel van de patiënt, ideaal voor verschillende soorten autologe transplantatieprocedures. Deze kit voegt ook de TNF-component (True NanoFat) toe. Dit gesloten systeem helpt het vetweefsel op maat te maken, zodat het kan worden geïnjecteerd met naalden van 27 g en 30 g. Selecteer de kit aan de hand van de harvest canule.




SoftTouch Carraway Microfat + TNF™



SoftTouch Miller Microfat + TNF™

- 1 stuks GEMS Tumescant Infiltrator 2.1mm x 15cm
- 2 stuks GEMS Carraway or Miller Speed Harvester 2.4mm x 15cm
- 1 stuks GEMS Tulip Injector 0.7mm x 4cm
- 1 stuks GEMS Tulip Injector 0.9mm x 5cm
- 1 stuks GEMS Tulip Injector 1.2mm x 7cm
- 1 stuks Johnnie Snap 60cc
- 1 stuks NanoTransfer Generation II
- 1 stuks Single-Use Sizing Transfer 1.2mm
- 1 stuks Single-Use Sizing Transfer 1.4mm
- 2 stuks Single-Use Anaerobic Transfer 2.4mm
- 2 stuks Harvesting Syringes 60cc BD
- 2 stuks Harvesting Syringes 10cc BD
- 4 stuks Injection Syringes 1cc BD

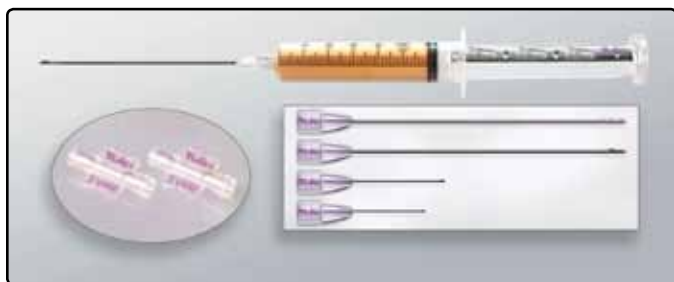

SoftFoot Microfat™

Het SoftTouch-systeem maakt gebruik van het eigen vetweefsel van de patiënt, ideaal voor verschillende soorten autologe transplantaties en osteopathische voetprocedures.

- 1 stuks GEMS Tumescant Infiltrator 2.1mm x 15cm
- 2 stuks GEMS Carraway Harvester 2.1mm x 15cm
- 1 stuks GEMS Tulip Injector 0.7mm x 4cm
- 1 stuks GEMS Tulip Injector 0.9mm x 5cm
- 1 stuks Johnnie Snap 60cc
- 1 stuks Single-Use Sizing Transfer 1.2mm
- 1 stuks Single-Use Sizing Transfer 1.4mm
- 2 stuks Single-Use Anaerobic Transfer 2.4mm
- 2 stuks Harvesting Syringes 60cc BD
- 2 stuks Harvesting Syringes 10cc BD
- 4 stuks Injection Syringes 1cc BD

SoftFoot Microfat + TNF™

Het SoftTouch-systeem gebruikt het eigen vetweefsel van de patiënt, ideaal voor verschillende soorten autologe transplantatieprocedures. Deze kit voegt ook de TNF-component (True NanoFat) toe. Dit gesloten systeem helpt het vetweefsel op maat te maken, zodat het kan worden geïnjecteerd met naalden van 27 g en 30 g.

- 1 stuks GEMS Tumescant Infiltrator 2.1mm x 15cm
- 2 stuks GEMS Carraway Harvester 2.1mm x 15cm
- 1 stuks GEMS Tulip Injector 0.7mm x 4cm
- 1 stuks GEMS Tulip Injector 0.9mm x 5cm
- 1 stuks Johnnie Snap 60cc
- 1 stuks NanoTransfer Generation II
- 1 stuks Single-Use Sizing Transfer 1.2mm
- 1 stuks Single-Use Sizing Transfer 1.4mm
- 2 stuks Single-Use Anaerobic Transfer 2.4mm
- 2 stuks Harvesting Syringes 60cc BD
- 2 stuks Harvesting Syringes 10cc BD
- 4 stuks Injection Syringes 1cc BD




The Tulip Soft Harvest GOLD Kit™

GOLD: Gentle Out-patient Lipoaspirate Delivery

De Tulip Soft Harvest GOLD Kit™ bevat alles wat nodig is om vet te oogsten en te verwerken om Tulip's TRUE NanoFat™ (TNF) te creëren.

1 stuks	GEMS Tumescant Infiltrator 2.1mm x 15cm
2 stuks	GEMS Carraway Harvester 2.1mm x 15cm
2 stuks	Miller OneSnap 60cc
1 stuks	NanoTransfer Generation II
1 stuks	Single-Use Sizing Transfer 1.2mm
1 stuks	Single-Use Sizing Transfer 1.4mm
2 stuks	Single-Use Anaerobic Transfer 2.4mm
2 stuks	Harvesting Syringes 60cc BD
2 stuks	Harvesting Syringes 10cc BD
4 stuks	Injection Syringes 1cc BD

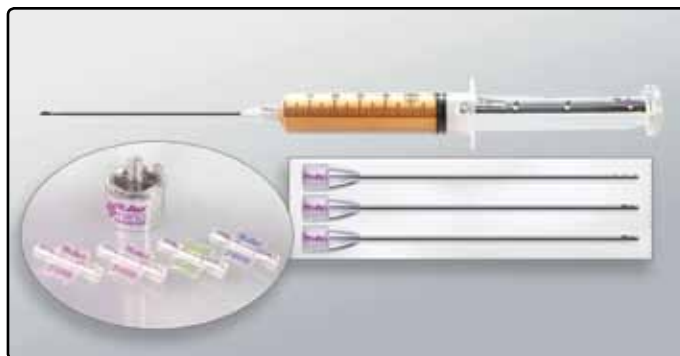

Door artsen aanbevolen herbruikbare instrumentensets

Tulip heeft de grote eer om samen te werken met leiders op het gebied van vetoverdracht bij het samenstellen van aanbevolen instrumentensets. Bestel deze sets, of gebruik ze als startpunt om een speciale set aan te passen.

Marten Clinic Starter Set™

De Martenset, ontworpen en geïnspireerd door Dr. Timothy Marten, is een herbruikbare en CellFriendly startset voor de veeleisende gezichts chirurg.

1 stuks	Tumescant Infiltrator SuperLuerLok 1.6mm x 15cm
1 stuks	Tonnard Harvester SuperLuerLok 2.1mm x 15cm
1 stuks	Carraway Harvester SuperLuerLok 2.1mm x 15cm
1 stuks	Carraway Harvester SuperLuerLok 2.4mm x 20cm
2 stuks	Tulip Micro Injector SuperLuerLok 0.7mm x 4cm
2 stuks	Tulip Micro Injector SuperLuerLok 0.7mm x 5cm
2 stuks	Tulip Micro Injector SuperLuerLok 0.9mm x 5cm
2 stuks	Tulip Micro Injector SuperLuerLok 1.2mm x 6cm
1 stuks	Tulip Micro Injector SuperLuerLok 1.2mm x 8cm
1 stuks	Toledo V-Dissector SuperLuerLok 1.4mm x 6cm
1 stuks	Anaerobic Transfer, Luer to Luer 2.4mm
1 stuks	Tulip Z Stand, Small
1 stuks	Tulip NanoSpin Laboratory Centrifuge
1 stuks	Centrifuge Caps for LuerLok Syringes, 50 ct. - Sterile
1 doos	Tulip Syringes BD 10cc LuerLock Box of 100
1 doos	Tulip Syringes BD 1cc LuerLock Box of 100



Tonnard/Verpaele MicroFat Set™

Deze herbruikbare en CellFriendly set bevat instrumenten die zijn ontworpen en aanbevolen door Dr. Patrick Tonnard en Dr. Alexis Verpaele. Het is een MicroFat-instrumentenset die perfect is voor fijne gezichtssculptuur en contouren.

1 stuks	Tumescant Infiltrator SuperLuerLok 2.1mm x 20cm
1 stuks	Tonnard Harvester SuperLuerLok 2.4mm x 20cm
1 stuks	Tulip Micro Injector SuperLuerLok 0.7mm x 5cm
1 stuks	Tulip Micro Injector SuperLuerLok 0.9mm x 5cm
1 stuks	JohnnieLok BD 10cc
1 stuks	JohnnieLok BD 20cc
1 stuks	Tulip Anaerobic Transfer Luer to Luer 2.4mm
1 stuks	Tulip Z-Stand, Small

The Ghavami Set™

Deze herbruikbare CellFriendly-set is geïnspireerd en aanbevolen door Dr. Ashkan Ghavami en is ontworpen voor lichaamscontouren en het opnieuw vormgeven van de billen.

1 stuks	Mercedes 60cc 3.7mm x 20cm
1 stuks	Mercedes 60cc 3.7mm x 25cm
1 stuks	Spoon Tip Injector 60cc 3.0mm x 15cm
1 stuks	Spoon Tip Injector 60cc 3.0mm x 20cm
1 stuks	Decant Stand Anaerobic Transfer 60cc to Luer Lock

Kijk vandaag nog op gdmedical.be om een set te bestellen

De herbruikbare sets van Tulip kunnen worden aangepast om aan specifieke behoeften te voldoen. Bel +32(0)2 808 58 80 om wijzigingen aan te vragen.

Tulip CellFriendly™ Harvesters



Carraway Harvester™

Een spiraalvormig ontwerp met drie poorten dat veilig en effectief is voor het oogsten van vetweefsel in meerdere vlakken, erg populair voor ingrepen met een klein volume die worden uitgevoerd met lokale anesthesie.



Miller Speed Harvester™

Een CellFriendly-harvester met zes poorten die in minimale tijd een maximaal weefselvolume oplevert. Gewoon revolutionair.



TriPort Harvester™

Een triple port harvester, ideaal voor het verkrijgen van kleine hoeveelheden vetweefsel uit één enkel vlak.



Tonnard Harvester™

Een unieke en effectieve multiport-harvester met verhoogde scherpe micropoorten, zeer effectief voor het oogsten door fibreus weefsel. De configuratie met 12 of 20 poorten maakt efficiënt oogsten mogelijk, zowel bij voorwaartse als achterwaartse bewegingen.



Sorensen Harvester™

Een minder agressieve multiport harvester met afgeschuinde micropoorten. De harvesters met 12 of 20 poortconfiguratie maken voorzichtig maar zeer efficiënt oogsten mogelijk, zowel bij de voorwaartse als achterwaartse bewegingen.



Trivisonno Micro Harvester – Signature Series™

Nieuw! Specifiek ontworpen voor selectieve en veilige verwijdering van de SVF-rijke oppervlakkige vetlaag in contact met de diepe dermis.

Tulip CellFriendly™ Specialty Instrumenten



Flap™

De Flap wordt voornamelijk gebruikt als ondermijnende dissector, gevolgd door oogsten en/ of injecteren.



Toledo V-Dissector™

Deze canule is speciaal ontworpen voor gebruik in het oppervlakkige compartiment. De snij-inkeping is erg handig voor het loslaten van dicht bindweefsel, zoals acnelittekens en nasolabiale plooien.



Bensimon Micro Sculptor – Signature Series™

Nieuw! Maak kennis met de Bensimon Micro Sculptor. Deze aanpassing van de Tonnard-harvester, ontworpen door Dr. Richard Bensimon, is ideaal voor liposuctie in het gezicht en het opwekken van huidcontractie. De kleine gaatjes zorgen voor een gladde contour en de kleine diameter maakt het mogelijk om met een naaldprik een markering achter te laten. Dit maakt meerdere ingangen mogelijk voor nauwkeurige contouren van de nek en gynaecomastie.



Pocar™

De Pocar is een percutane punch die wordt gebruikt om een omtrekincisie te maken voorafgaand aan infiltratie en weefselextractie. Het is ontworpen om een goede afdichting te behouden en littekens te minimaliseren.

Verkrijgbaar in maat Large voor lichaam 4,6 mm •

Tulip CellFriendly™ Injectoren



Tulip Injector™

Met het Tulip Medical ontwerp van de stompe punt dat moeiteloos door zacht weefsel gaat, terwijl de integriteit van de vasculaire structuur behouden blijft. Een grote ovale poortmaat, maakt deze canule een werkpaard voor injecties in kleine hoeveelheden.



J.W. Little Injector™

Een innovatief stomp ontwerp met een kleinere ronde poortmaat voor nauwkeurige levering van microfat. Dit is vooral handig in het periorbitale gebied en de vermiljoen huidrand van de lippen.



Spoon Tip Injector™

Een stompe lepelvormige punt ontworpen met een grotere poort voor snelle injectie van grotere volumes, een baanbrekend werkpaard voor borsten en billen.



Begin altijd met Tulip CellFriendly Infiltratie



Tumescent Infiltrator™

De multi-spiraalvormige poortconfiguratie maakt een gelijkmatige verdeling van vloeistof mogelijk, specifiek gebruikt voor de infusie van tumescente oplossing.



Tulip Curved Injectors™

De gebogen injectiecanules van Tulip zijn ontworpen gemakkelijk en snel van injectievlak te wisselen door de oriëntatie van de poort te draaien.

Tulip CellFriendly™ Canules



Standard™

Dit is het meest gebruikte ontwerp van een canule voor het verwijderen van vetweefsel. De enkele poort bevindt zich 180 graden vanaf de duimsteun op de hub.



Cobra Bibevel™

De canule met twee poorten en taps toelopende punt is zeer effectief bij het werken door zeer dicht weefsel, agressiever dan de Standard, Pyramid en Mercedes.



Mercedes™

Deze omtrekconfiguratie met drie poorten is effectief voor het oogsten van vetweefsel in meerdere vlakken.



Pyramid™

Dit veelgebruikte ontwerp heeft drie poorten die zich 180 graden van de duimafdruk bevinden. Het is een iets agressievere canule dan de standaard.

Standaard instrumenten dimensies*

	TUBING DETAIL	GAUGE	LENGTE
NANO			
• 0.3mm	0.51mm OD(0.31mm ID)	25GA	XXcm**
• 0.5mm	0.64mm OD(0.43mm ID)	23GA	XXcm**
• 0.7mm	0.91mm OD(0.66mm ID)	20GA	XXcm
• 0.9mm	1.07mm OD(0.81mm ID)	19GA	XXcm
MICRO			
• 1.2mm	1.27mm OD(0.98mm ID)	18GA	XXcm
• 1.4mm	1.47mm OD(1.21mm ID)	17GA	XXcm
• 1.6mm	1.65mm OD(1.36mm ID)	16GA	XXcm
MACRO			
● 2.1mm	2.11mm OD(1.70mm ID)	14GA	XXcm
● 2.4mm	2.41mm OD(1.96mm ID)	13GA	XXcm
● 3.0mm	3.05mm OD(2.39mm ID)	11GA	XXcm
● 3.7mm	3.76mm OD(3.00mm ID)	09GA	XXcm
● 4.6mm	4.57mm OD(3.81mm ID)	07GA	XXcm

*Key: GA Gauge, OD Outside Diameter, ID Inside Diameter

** Only available in single-use

Profiteer van het Tulip-voordeel met Cell Friendly™ - instrumenten!

Alle instrumenten van Tulip zijn afgewerkt met Tulip's exclusieve CellFriendly Coatings. Deze afwerking geeft het instrument een soepele, gladde werking. Minder wrijving zorgt voor minder spanning en beschadiging van het weefsel voor betere resultaten en om vermoeidheid van de chirurg tijdens de procedure te voorkomen.



Spuitaansluitingen van machine-aansluiting van Tulip instrumenten bieden superieure resultaten



60 cc Toomey Hub



Tulip SuperLuerLok™
U.S. Patent Number 6,569,118



Luer Lock



Tulip SuperLuerLok™

U.S. Patent Number 6,569,118

Krijg meer veiligheid en controle bij het gebruik van Tulip Instrumenten. De buitenste romp van de SuperLuerLok zorgt voor een strakke afdichting op de luer-verbinding en zorgt voor een beter vacuüm en stabiliteit.



Power Cannula™

Bestel Tulip canules en harvestmachines als een compleet instrument uit één stuk, klaar voor gebruik met een aspiratiemachine voor liposuctie en procedures voor het oogsten van grote hoeveelheden vet.

Tulip GEMS Harvesters

Tulip®
GEMS
Single-Use • CellFriendly



GEMS Carraway Harvester™

Een spiraalvormig ontwerp met drie poorten dat veilig en effectief is voor het oogsten van vetweefsel in meerdere vlakken, erg populair voor ingrepen met een klein volume die worden uitgevoerd met lokale anesthesie.



GEMS Miller Speed Harvester™

Een CellFriendly-harvester met zes poorten die in minimale tijd een maximaal weefselvolume oplevert. Gewoon revolutionair.




GEMS Tonnard Harvester™

Een unieke en effectieve multiport-harvester met verhoogde scherpe micropoorten, zeer effectief voor het oogsten door fibreus weefsel. De configuratie met 12 of 20 poorten maakt efficiënt oogsten mogelijk, zowel bij voorwaartse als achterwaartse bewegingen.



GEMS Sorensen Harvester™

Een minder agressieve multiport harvester met afgeschuinde micropoorten. De harvesters met 12 of 20 poortconfiguratie maken voorzichtig maar zeer efficiënt oogsten mogelijk, zowel bij de voorwaartse als achterwaartse bewegingen.

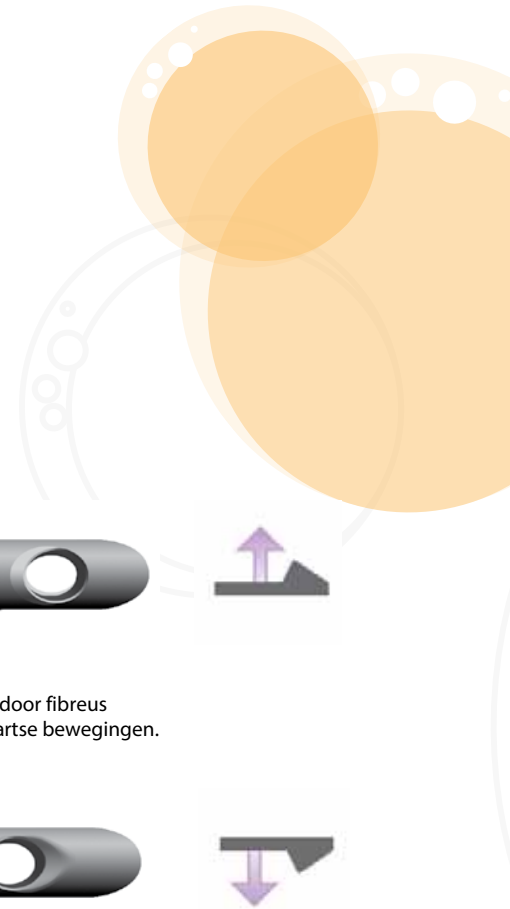

Tulip GEMS Injectoren



GEMS Tulip Injector™

Met het Tulip Medical ontwerp van de stompe punt dat moeiteloos door zacht weefsel gaat, terwijl de integriteit van de vasculaire structuur behouden blijft. Een grote ovale poortmaat, maakt deze canule een werkpaard voor injecties in kleine hoeveelheden.



GEMS Spoon Tip Injector™

Een stompe lepelvormige punt ontworpen met een grotere poort voor snelle injectie van grotere volumes, een baanbrekend werkpaard voor borsten en billen.



Tulip GEMS Infiltratie

Begin altijd met Tulip CellFriendly Infiltratie



GEMS Tumescence Infiltrator™

De multi-spiraalvormige poortconfiguratie maakt een gelijkmatige verdeling van vloeistof mogelijk, specifiek gebruikt voor de infusie van tumescence oplossing.

Tulip®
GEMS
Single-Use • CellFriendly

Tulip GEMS Accessoires



Johnnie Snap™

Miller OneSnap™

De single use Johnnie Snap- en Miller OneSnapspuitvergrendelingen, waarvoor patent is aangevraagd, zijn ontworpen om vacuüm te handhaven bij variabele drukniveaus, van laag tot hoog. Met een nieuw ontworpen plunjerklep wordt deze vergrendeling één waarbij de plunjer moeiteloos vacuümdruk levert.

De Johnnie Snap heeft meerdere vergrendelingsposities voor incrementeel lagedrukvacuüm.

- 20 cc Johnnie Snap its BD and Monoject Spuiten
- 60 cc Johnnie Snap en Miller OneSnap passen alleen op BD Spuiten.



NanoTransfer™ Generation II

De single use Tulip NanoTransfer, waarop patent is aangevraagd, is een essentieel onderdeel van het NanoFat Protocol. Het gepatenteerde gesloten systeem van Tulip levert vetweefsel dat kan worden geïnjecteerd met 27G- en 30G-naalden.

Eenmalige anaërobe en dimensioneringstransfers (hieronder) zijn ook een onderdeel van het GEMS NanoTransfer Protocol

Single-Use Transfers



Single-Use Anaerobic en Sizing Transfers™

De voorgesteriliseerde transfers van Tulip voor eenmalig gebruik zijn ontworpen voor eenvoudig, schoon, gesloten transport van vetweefsel tussen luer lock-injectiespuiten.

Anaërobe overdrachten en overdrachten voor eenmalig gebruik zijn ook een onderdeel van het NanoTransfer-protocol.

Maten 1.2mm • 1.4mm • 2.4mm



Geavanceerde weefselverwerking

Tulip®  **nano**

Vetoverdracht op
het kleinste niveau



NanoTransfer™ Generation I

Tulip Medical's NanoTransfer™, waarvoor patent is aangevraagd, ontworpen om vet tot het kleinste niveau te brengen. Het gepatenteerde gesloten systeem levert vetweefsel dat kan worden geïnjecteerd met naalden van 27 g en 30 g. De NanoTransfer Set Generation I bevat alle essentiële items die nodig zijn voor het NanoFat-protocol.

- NanoTransfer Generation I
- NanoTransfer Cartridges (pack of 5)
- Sizing Transfer (GEMS or Reusabale) Luer to Luer 1.2mm
- Sizing Transfer (GEMS or Reusabale) Luer to Luer 1.4mm
- Anaerobic Transfer (GEMS or Reusabale) Luer to Luer 2.4mm

Alle anaërobe transfers en NanoTransfer-cartridges zijn voorgesteriliseerd verkrijgbaar.

Tulip Anaërobe Transfers en Emulgatoren



Anaerobic en Sizing Transfers™ (reusable)

Anaërobe transfers worden gebruikt om geëxtraheerd weefsel voor te bereiden en over te brengen voor herinjectie. De anaërobe overdracht is ook een belangrijk onderdeel van het Tulip Nano Fat System voor het conditioneren van weefsel voor gebruik in de Tulip NanoTransfer.

- Sizing Transfer Luer to Luer 1.2mm
- Sizing Transfer Luer to Luer 1.4mm
- Anaerobic Transfer Luer to Luer 2.1mm



Anaerobic Transfer Decant Stand™

Deze reusable Anaërobe transfers worden gebruikt om geëxtraheerd weefsel voor te bereiden en over te brengen voor herinjectie. Het ontwerp van de decanteerstandaard maakt het ook mogelijk om het geëxtraheerde weefsel op natuurlijke wijze te decanteren.



- 60cc toomey to Luer Lock
- Luer Lock to Luer Lock

Tulip Syringe Locks (reusable)



Verkrijgbaar in zes populaire spuitgroottes.

- 60cc Monoject
- 60cc BD
- 20cc BD
- 20cc Monoject
- 10/12cc Monoject
- 10cc BD

JohnnieLok™

De JohnnieLok houdt de zuiger onder vacuüm voor eenvoudig oogsten met een spuit. De plunjer wordt teruggetrokken tot het gewenste drukniveau en vervolgens gedraaid en veilig vergrendeld.



SnapLoks™

Deze klikvergrendelingen van de injectiespuit passen in de zuigerflenzen van de injectiespuit. Wanneer de zuiger wordt uitgetrokken, klikt de vergrendeling open op de lip van de cilinder, waardoor de spuit onder vacuüm wordt gehouden.



Power Adaptor™

De Tulip Power Adapter past de canule en de spuit aan voor gebruik met een aspiratiemachine.

- 60cc Monoject
- 20cc BD
- 20cc Monoject

Decanteren van spuiten



Tulip Z- Standaard – Vorm volgt functie

Geen montage nodig • Eenvoudig schoon te maken • Vrijwel onverwoestbaar

Tulip Spuiten assortiment

Spuiten voor gebruik met onze liposuctiecanules, micro-injectoren en accessoires.



- A. 60cc Toomey Monoject Syringe - doos van 20
- B. 60cc Luer Monoject Syringe - doos van 40
- C. 20cc Luer BD Syringe - doos van 40
- D. 10cc Luer BD Syringe - doos van 100
- E. 1cc Luer BD Polycarbonate Syringe - doos van 100

Spuittip dopjes



- A. Luer Lock Syringes (Steriel)
- B. Luer Lock Syringe Centrifuge Caps (Steriel)
- C. Reusable Toomey Tip (onsteriel)

Weefselverwerking



Tulip NanoSpin™

Advance Small-Volume Tissue Processing

Een hoogwaardige centrifuge met klein volume, ontworpen door Tulip voor geavanceerde weefselverwerking direct in een spuitcilinder met gesloten systeem.

De rotor van de NanoSpin biedt plaats aan acht injectiespuiten van 10 cc.

De NanoSpin heeft een autoclaveerbare rotor en spuithouders die steriele verwerking eenvoudig maken.

- Rotor biedt plaats aan acht injectiespuiten van 10 cc • 3500 tpm • Digitale snelheid en tijd • 1534 Max G-force 12V met een DC-motor
- Gemaakt in de VS.

nanoTM SPIN

- De Tulip NanoSpin biedt plaats aan maximaal acht injectiespuiten van 10cc inclusief doppen en Tulip Crowns.
- Versnel uw workflow en verhoog de efficiëntie
- Vermindert contaminatie
- Juiste scheidingen
- Ontworpen als een gesloten systeem voor gebruik met injectiespuiten van 10 cc met Tulip Crowns



Weefselverwerking

Geavanceerd gesloten systeem voor weefselverwerking



Tulip Crown™ (reusable)

Een klein apparaat met een enorme impact - Tulip Crowns veranderen het centrifugespel. De Crown is ontworpen om de inhoud van de injectiespuit tijdens het centrifugeren in een vrijwel anaërobe atmosfeer te houden. Bevestig eenvoudig een Crown aan de zuiger van de spuit, oogst en draai de zuiger eraf. De Crown heeft ook een extra, zelfsluitende extractorpoort voor het netjes verwijderen van de inhoud van elke laag gecentrifugeerd weefsel. Patent aangevraagd.

Decanteren van weefsel

Canisters voor eenmalig gebruik voor decanteren grote volumes



Tissue-Trans® Filtron Units

Verkrijgbaar in 3 maten 500cc, 1000cc, 2000cc
Gesloten systeem met bewezen filtering en levensvatbaarheid van vet, geen centrifuge nodig.



Reiniging en sterilisatie



Tulip Soft Picks™

Zelfs de kleinste CellFriendly micro-injectoren van Tulip zijn nu snel, gemakkelijk en voorzichtig te reinigen. Tulip Soft Picks zullen gegarandeerd niet schuren of vervuilen en zijn de ideale reinigingsoplossing voor eenmalig gebruik voor canules en micro-injectoren met een kleinere diameter. Autoclaveerbaar voor gebruik in het steriele veld, indien gewenst.

- **Micro** - Voor het reinigen van canules van 0,7 mm en 0,9 mm, Lengte-10 cm Verpakt per 10
- **Small** - Voor het reinigen van canules van 1,2 mm, 1,4 mm en 1,6 mm, Lengte-15cm Verpakt per 10
- **Medium** - Voor het reinigen van canules van 2,1 mm, 2,4 mm en 3,0 mm, Lengte-25cm Verpakt per 10



CellFriendly Instrument Cleaning Brushes™


Deze borstels zijn speciaal ontworpen om CellFriendly canules te reinigen. Zachte nylon borstelharen reinigen het lumen zonder het CellFriendly oppervlak te beschadigen. Gebruik alleen Tulip Cleaning Brushes en Tulip Soft Picks op Tulip canules om de CellFriendly voordelen te behouden. Tot 10 maal herbruikbaar.

- **Small** - Voor het reinigen van canules van 1,2 en 1,4 mm, 10 borstels
- **Medium** - Voor het reinigen van 2,1, 2,4 en 3,0 mm canules, 10 borstels
- **Large** - Voor het reinigen van canules van 3,7 en 4,6 mm, 5 borstels
- **XLong** - Voor het reinigen van canules met elektrische handgreep

Tulip Gold Standard Autoclave Trays™

De nieuwe Gold Standard autoclaaf trays van Tulip zijn speciaal ontworpen om Tulip Gold Standard Sets en individuele Tulip instrumenten te beschermen, te huisvesten en op te slaan. Extra topmatten beschikbaar.

- **Medium - Micro en Gezichtscanules**
(15.24 x 25.40 x 4.45 cm)
- **Large - Gezichts- en lichaamsanules**
(15.24 x 40.64 x 4.45 cm)

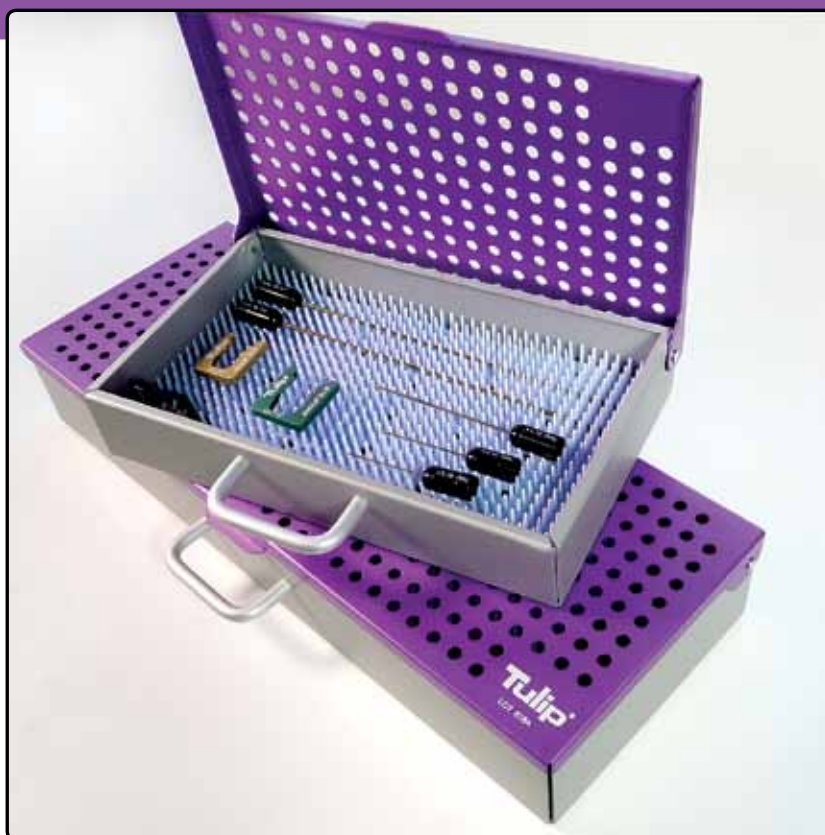

GD Medical is de exclusieve distributeur van het Tulip productportfolio voor België en Nederland.

Voor meer informatie of contact met onze account managers kunt u bellen met +32(0)2 808 58 80 of kijken op www.gdmedical.be



Delivering the benefits of fat to millions...

Tulip[®]
AUTHORIZED
DISTRIBUTOR

GD Medical
Hastelweg 224
5652 CL Eindhoven
Nederland

Tulip Medical Products is a division of Black Tie Medical Inc.
Tulip product names and logos are trademarks of Black Tie Medical Inc.
and may not be used without permission.
US Patent # 6,569,118 All Rights Reserved © 2020 Black Tie Medical Inc.