


Product portfolio Diabetes

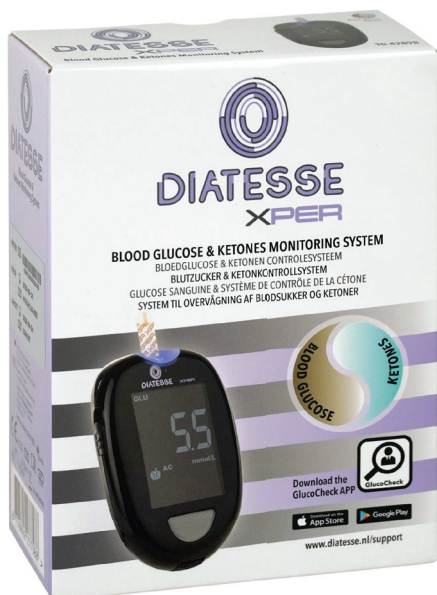

WE
TAKE
CARE.

KWALITEIT TEGEN EEN BETAALBARE PRIJS

Het doel van GD Medical is een zo volledig mogelijk portfolio aan diabeteshulpmiddelen te kunnen leveren, waarbij wij staan voor kwaliteit tegen een betaalbare prijs.

We bieden een uitgebreid portfolio eigen diabeteshulpmiddelen onder de merknamen Diatesse® en Ht One®.

Dit portfolio bestaat uit bloedglucose-meters, teststrips, lancetten en pennaalden.

Een ander belangrijk onderdeel van ons assortiment is het veiligheidsportfolio bestaande uit diverse veiligheidslancetten en -pennaalden.

We hebben een nauwe samenwerking met landelijke medische speciaalzaken, fabrikanten, voorschrijvers en certificerende instanties.

Ons ervaren team met gespecialiseerde medewerkers beschikt over vakinhoudelijke en marktkennis op het gebied van diabeteshulpmiddelen en de vergoedingensystematiek.

**WE
TAKE
CARE.**

INHOUD

1. Bloedglucosemeters

Diatesse XPER 5

TD Gluco 7

2. Teststrips

Diatesse XPER glucose 9

Diatesse ketonen 9

TD Gluco glucose 9

3. Pennaalden

Ht One ReadyGard™ Duo veiligheidspenaalden 11

Ht One Plus Fine insuline pennaalden 12

4. Lancetten

Ht One veiligheidslancetten Flex 14

Ht One veiligheidslancetten 15

Ht One lancetten 16

5. Prikpen

Diatesse prikpen Soft 17

6. Dextrose tabletten & gel

Lift Glucotabs dextrosetabletten 19

Glucogel 19

Bestelinformatie 20

Contactgegevens

1. BLOOD GLUCOSE METERS



DIATESSE XPER BLOEDGLUCOSE & KETONENMETER



Diatesse XPER is een zeer gebruiksvriendelijke en nauwkeurige glucosemeter. Deze meter wordt geleverd in een compleet startpakket. Naast glucose heeft deze meter ook de mogelijkheid ketonen te meten.

Belangrijkste eigenschappen Diatesse XPER bloedglucose & ketonenmeter:

- Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de Diatesse XPER een nauwkeurigheid behaalt van $\pm 10\%$. In Nederland ligt deze norm op 15%.
- Duidelijk, groot en verlicht display.
- Bluetooth® en USB-datakoppeling.
- Optioneel: maaltijdmarkering.
- Breed hematocrietbereik (0-70 L/L).
- Handleiding in 5 talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans & Deens.
- Gebruikersvideo's in 8 talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Turks, Arabisch, Pools en Deens.



KETONEN

Mogelijkheid ketonen te meten

- Aangezien een ketoacidose in combinatie met diabetes kan leiden tot een diabetische coma is het meten van ketonen onder speciale omstandigheden sterk aan te raden.

Makkelijk in gebruik

- Eenvoudige menustructuur
- Uitgebreid geheugen (1000 metingen)
- De metingen zijn eenvoudig uit te lezen via de GlucoCheck- app (zowel voor Android als iOS of via de computer (draadloos of via een USB- kabel)
- Door de strip- uitwerpfunctie hoeft de gebruiker de teststrip niet aan te raken, wel zo hygiënisch.

Geschikt voor meerdere doelgroepen

- Mensen met diabetes die weinig hoeven meten, vanwege de lange houdbaarheid van de teststrips.
- Mensen met diabetes die juist veel moeten meten of deze meter gebruiken om te kalibreren, vanwege de nauwkeurige resultaten.
- Ook geschikt voor neonataal en dialyse-patiënten vanwege het brede hematocrietbereik (0-70 L/L).

Resultaat bijhouden

- GlucoCheck app inclusief bolus calculator
- Mogelijkheid aan te geven of een bloedglucosewaarde voor (AC) of na (PC) een maaltijd is ingevoerd
- Computer software beschikbaar
- De metingen kunnen in een handig overzicht gedeeld worden met de behandelaar

Overige technische kenmerken

- Bluetooth® en USB- datakoppeling
- Automatische herkenning controle vloeistof

Ondersteunend materiaal voor gebruikers en zorgverleners:

Instructievideo's in 8 talen: www.gdmedical.nl/product/diatesse-xper
(Nederlands, Engels, Duits, Frans, Pools, Arabisch en Turks en Deens)

Handleiding in 5 talen.

De Diatesse XPER bloedglucosemeter is verkrijgbaar in een startpakket.

Deze bevat:

- 1 Diatesse XPER meter
- 1 prikpen
- 10 Diatesse XPER glucose teststrips
- 10 Lancetten 30G
- 2 batterijen (1.5V AAA)
- Gebruiksaanwijzing
- Opbergetui





TD GLUCO BLUETOOTH BLOEDGLUCOSEMETER

De TD Gluco Bluetooth® is een eenvoudig te gebruiken bloedglucosemeter (alleen verkrijgbaar in Nederland).

Belangrijkste eigenschappen:

- Uit te lezen via de GlucoCheck app middels een Bluetooth connectie.
- Groot LCD scherm met achtergrondverlichting.
- Strip- uitwerp functie voorkomt contact met bloed.
- Zeer klein bloedmonster benodigd van slechts 0.5 µl.
- Uitslag binnen 5 seconden.
- Geen zuurstofinterferentie door gebruikmaking GDH-FAD enzym.
- Mogelijkheid aan te geven of een bloedglucosewaarde voor (AC) of na (PC) een maaltijd is ingevoerd.

Ondersteunend materiaal voor gebruikers en zorgverleners:

Instructievideo in 4 talen: www.gdmedical.nl/product/td-gluco-bluetooth-ht-one-3

Handleiding in 4 talen (Nederlands, Engels, Duits en Frans).

De TD Gluco Bluetooth® meter is verkrijgbaar in een startpakket.

Deze bevat:

- 1 TD Gluco Bluetooth® meter
- 1 prikpen
- 10 TD Gluco teststrips
- 10 lancetten (30G)
- 2 batterijen (1.5V AAA)
- Gebruiksaanwijzing
- Opbergetui



2. TESTSTRIPS



DIATESSE XPER TESTSTRIPS - GLUCOSE

De Diatesse XPER teststrip bevat een zeer doordachte technologie met maar één doel: de gebruiker de meest betrouwbare meting garanderen.

Door toepassing van goud als geleidend materiaal wordt een zeer hoge stabiliteit bereikt. De Diatesse XPER teststrip beschikt daarnaast over 1 algemene opzuigopening die overgaat in 2 afzonderlijke interne opzuigopeningen en 5 elektrodes. De 5e elektrode controleert het (eventueel) te weinig aangeboden bloedvolume of luchtbellens. Met een monstergrootte van slechts 0,5 µl geeft de Diatesse XPER teststrip binnen 5 seconden het resultaat van de meting.



De Diatesse XPER teststrips kunnen worden gebruikt tot en met de houdbaarheidsdatum op de verpakking. Dit is uniek aangezien de meeste teststrips binnen 3 tot 6 maanden na openen van de verpakking gebruikt moeten worden. Hierdoor zijn deze strips ook ideaal voor patiënten die niet veel hoeven te testen.

Nieuw in ons assortiment zijn de Diatesse XPER teststrips verpakt per stuk (50 stuks in een doosje).



DIATESSE TESTSTRIPS - KETONEN

De Diatesse teststrips ketonen zijn specifiek ontwikkeld om ketonen te meten.

Aangezien een ketoacidose in combinatie met diabetes kan leiden tot een diabetische coma is het meten van ketonen in specifieke situaties sterk aan te raden.



TD GLUCO TESTSTRIPS – GLUCOSE

- Zeer klein bloedmonster nog van slechts 0.5 µl nodig.
- Meetresultaat binnen 5 seconden.



3. (VEILIGHEIDS)PENNAALDEN



HT ONE READYGARD™ DUO VEILIGHEIDSPENNAALDEN

Bij de Ht One ReadyGard™ Duo-veiligheidspennaalden wordt de naald na gebruik aan de voor- en achterkant verborgen, waardoor de zorgverlener minder aan de naald wordt blootgesteld.

Zowel voor- als na gebruik van de duo veiligheidspennaald is er geen risico voor de gebruiker en de zorgverlener op prikaccidenten, waarmee dit product volledig tegemoet komt aan de huidige veiligheidseisen.

Door de beschermcover op de Ht One ReadyGard™ Duo veiligheidspennaald levert het prikken voor de gebruiker minder angst op, aangezien de naald niet goed zichtbaar is.

Na gebruik wordt door middel van een duidelijke **rode indicator** aangegeven dat de veiligheidspennaald is gebruikt.



Het belangrijkste voordeel t.o.v. andere Duo veiligheidspennaalden is dat door het grotere contactoppervlak van de ReadyGard Duo, er minder druk uitgeoefend hoeft te worden op de huid wat het prikken comfortabeler maakt voor de gebruiker. Daarnaast zijn er minder stappen nodig in het gebruik, waardoor de toepassing eenvoudig en snel uitgevoerd kan worden.

De Ht One ReadyGard™ Duo veiligheidspennaald is beschikbaar in onderstaande maten:



4mm – 32 G - 100 stuks per verpakking



5mm – 31 G - 100 stuks per verpakking

HT ONE PLUS FINE PENNAALDEN

Ht One PlusFine pennaalden zijn bestemd voor de toediening van insuline. Ze zijn steriel en voor eenmalig gebruik.

De pennaalden zijn universeel en passen op alle gangbare insulinepennen.

De pennaalden hebben een silicone coating voor comfortabel prikken zonder huidirritatie.

Elk type pennaald heeft een eigen kleur.



Ondersteunend materiaal voor gebruikers en zorgverleners:

Instructievideo: www.gdmedical.nl/product/diabetes-pennaalden

- De **100 stuks** verpakkingen van de Ht One Plus Fine pennaalden zijn beschikbaar in vier afmetingen: 4mm, 5mm, 6mm en 8mm.
- De **15 stuks** verpakkingen van de Ht One Plus Fine pennaalden zijn beschikbaar in twee afmetingen: 4mm en 5mm.

Alle verpakkingen hebben 4 talen, inclusief gebruiksaanwijzing op de achterzijde.

100 stuks



4mm:
0.23mm 32G x 4mm



5mm:
0.25mm 31G x 5mm



6mm:
0.25mm 31G x 6mm



8mm:
0.25mm 31G x 8mm

15 stuks



4mm:
0.23mm 32G x 4mm



5mm:
0.25mm 31G x 5mm

4. (VEILIGHEIDS)LANCETTEN

Ht one



HT ONE VEILIGHEIDSLANCET FLEX

De Ht One veiligheidslancet Flex vergroot de flexibiliteit en het comfort voor patiënten met drie instelbare prikdieptes. Daarbij is de zorgverlener optimaal beschermd tegen prikaccidenten.

Eenvoudig in gebruik

Het gewenste bloedvolume is eenvoudig te verkrijgen. Op de verpakking wordt aan de hand van pictogrammen helder uitgelegd hoe u onze veiligheidslancet Flex gebruikt en de gewenste prikdiepte kunt instellen.

Comfortabel prikken

De naaldpunt is facetgeslepen en heeft een siliconenlaag voor comfortabel prikken. Daarnaast zorgt dit voor optimale huidpenetratie en verzekert vrijwel pijnloze prikken. Geschikt voor volwassenen, kinderen onder 1 jaar en neonaten.

Veilig

Door het eenmalige gebruik is er geen risico op kruisbesmetting. Het unieke prikmechanisme sluit onbedoelde prikken uit, terwijl het lancet automatisch uit de huid wordt teruggetrokken voor optimale veiligheid.

De Ht One Veiligheidslancet Flex is verkrijgbaar in **twee varianten**, ieder instelbaar in **3 verschillende prikdieptes**:

- 23G met prikdieptes van 1.3mm, 1.8mm & 2.3mm
- 28G met prikdieptes van 1.3mm, 1.8mm & 2.3mm



HT ONE VEILIGHEIDSLANCETTEN

De Ht One veiligheidslancetten zijn veilig en eenvoudig in gebruik. Een prikken is niet nodig. Veiligheidslancetten worden veel gebruikt door zorgprofessionals, aangezien gebruik hiervan het risico op prikaccidenten voorkomt.

Veilig

- Het automatische terugtreksysteem voorkomt dat de scherpe naald, na gebruik, blootgesteld blijft.
- Hiermee wordt voorkomen dat iemand zichzelf of een ander per ongeluk prikt.

Comfortabel voor de gebruiker

- Verkrijgt dezelfde hoeveelheid bloed met beduidend minder pijn.
- De gepatenteerde technologie vermindert de kracht van de activering, het geluid en de vibratie.
- Ultra-scherpe kwaliteitsnaalden reduceren huidbeschadiging en pijn tot een minimum.
- Door de consistente prikdiepte wordt het risico op herhalen van de procedure verminderd.

Eenvoudig te gebruiken

- Dop eraf draaien en drukken.
- Geen prikken nodig en daarmee ook niet nodig om naalden te verwijderen en te plaatsen.
- Intuïtief in gebruik, geschikt voor alle leeftijden.
- Klein, makkelijk mee te nemen.

De Ht One veiligheidslancetten zijn beschikbaar in 4 maten / prikdieptes:



1.5 mm



1.8 mm



2.2 mm



2.4 mm

HT ONE LANCETTEN

De Ht One lancetten zijn eenvoudig in gebruik, steriel, voor eenmalig gebruik en toepasbaar met de Diatesse prikpen.

Door het universele ontwerp zijn de Ht One lancetten echter ook te gebruiken in combinatie met alle gangbare prikpenen.

De lancetten zijn beschikbaar in een naalddiameter van 28G en 30G en verpakt per 100 stuks.



5. PRIKPEN



DIATESSE PRIKPEN SOFT

De Diatesse prikpen Soft biedt onderstaande voordelen:

- Universeel model
- Te gebruiken met Ht-One lancetten (zie pag. 19)
- 9 prikniveaus
- Veilig & eenvoudig plaatsen en verwijderen van lancetten
- Uitgelijnd en gekalibreerd prikmechanisme (minder pijnlijk)
- Afsluitbare dop

Ondersteunend materiaal voor gebruikers en zorgverleners:

Instructievideo: www.gdmedical.nl/product/diatesse-prikpen

Verpakking met instructie in 5 talen.



6. DEXTROSE TABLETTEN & GEL



LIFT GLUCOTABS DEXTROSETABLETTEEN & GLUCOGEL

Lift GlucoTabs bevatten 3,7 gram snel werkende koolhydraten. Hierdoor kan de gebruiker gemakkelijk de juiste dosis koolhydraten innemen voor meer energie.

Het unieke buisje van de Lift GlucoTabs houdt de tabletten vers, droog en beschermt ze tegen breken. De buisjes zijn gemakkelijk mee te nemen in een tas of broekzak. De buisjes zijn makkelijk navulbaar met 10 tabletten vanuit de navulverpakking van 50 stuks.

Lift GlucoTabs zijn verkrijgbaar per buisje met 10 stuks of navulverpakking van 50 stuks in de smaken:

- Citroen/limoen
- Bosbes
- Sinaasappel
- Framboos

Glucogel

Glucogel is een glucose gel die snel opgenomen wordt door het mondslijmvlies. Deze handige meeneem tubes zijn ideaal voor de momenten waarop snel energie nodig is.

Een verpakking bevat 3 tubes gel. Een tube bevatten 25 gram waarvan 40% glucose, oftewel 10 gram glucose per tube.



BESTELINFORMATIE

* Alleen verkrijgbaar in NL ** Alleen verkrijgbaar in België

ARTIKELCODE	PRODUCT OMSCHRIJVING
GD101422	Diatesse XPER startpakket + 10 Diatesse XPER teststrips mmol/L
GD105430	Diatesse XPER startpakket glucose mg/dL & ketonen mmol/L
GD100850	Diatesse XPER teststrips (50 stuks/ verpakking)
GD104148	Diatesse XPER teststrips per stuk verpakt (50 stuks/verpakking)*
GD101439	Diatesse β - ketonen teststrips (10 stuks/verpakking)
GD101840	Diatesse prikpen Soft (1)
GD101761	Ht One TD-GLUCO Bluetooth startpakket + 10 TD-GLUCO test strips*
GD100222	Ht One TD-GLUCO teststrips (50 stuks/verpakking)*
GD100225	Ht One Plusfine pennaalden 4mm 32G (100 stuks/ verpakking)
GD100156	Ht One Plusfine pennaalden 5mm 31G (100 stuks/ verpakking)
GD100157	Ht One Plusfine pennaalden 6mm 31G (100 stuks/ verpakking)
GD100158	Ht One Plusfine pennaalden 8mm 31G (100 stuks/ verpakking)
GD105437	Ht One Plusfine pennaalden 4mm 32G (15 stuks/ verpakking)
GD105438	Ht One Plusfine pennaalden 5mm 31G (15 stuks/ verpakking)
GD103698	Ht One ReadyGard Duo veiligheidspennaalden 4 mm 31G (100 stuks/ verpakking)
GD103699	Ht One ReadyGard Duo veiligheidspennaalden 5 mm 31G (100 stuks/ verpakking)
GD104122	Ht One Veiligheidslancet Flex 23G (1.3/1.8/2.3mm) (100 stuks/ verpakking)
GD104124	Ht One Veiligheidslancet Flex 28G (1.3/1.8/2.3mm) (100 stuks/ verpakking)
GD101226	Ht One veiligheidslancetten 1,5 mm (100 stuks/ verpakking)
GD100195	Ht One veiligheidslancetten 1,8 mm (100 stuks/ verpakking)
GD100196	Ht One veiligheidslancetten 2,2 mm (100 stuks/ verpakking)
GD101202	Ht One veiligheidslancetten 2,5 mm (100 stuks/ verpakking)
GD100141	Ht One lancetten 28G (100 stuks/ verpakking)
GD100194	Ht One lancetten 30G (100 stuks/ verpakking)

BESTELINFORMATIE

ARTIKELCODE	PRODUCT OMSCHRIJVING
GD103859	LIFT GlucoTabs framboos tube (10)
GD103860	LIFT GlucoTabs framboos pot (50)
GD103855	LIFT GlucoTabs sinaasappel tube (10)
GD103856	LIFT GlucoTabs sinaasappel pot (50)
GD103857	LIFT GlucoTabs citroen/ limoen tube (10)
GD103858	LIFT GlucoTabs citroen/ limoen pot (50)
GD103853	LIFT GlucoTabs bosbes tube (10)
GD103854	LIFT GlucoTabs bosbes pot (50)
15658171	LIFT GlucoGel 25gram (3)
GD100228	Controle vloeistof Ht One TD Gluco / Diatesse XPER 4ml (1)



CONTACTGEGEVENS

GD Medical

Park Forum 1057
5657 HJ Eindhoven
Nederland
+31(0) 40 3031 090

Customer Service

+31(0) 40 3031 099
diabetes@gdmedical.nl

Website

www.gdmedical.nl

**WE
TAKE
CARE.**